


儿茶素类（罐装绿茶饮料：I 公司）

罐装绿茶饮料的分析

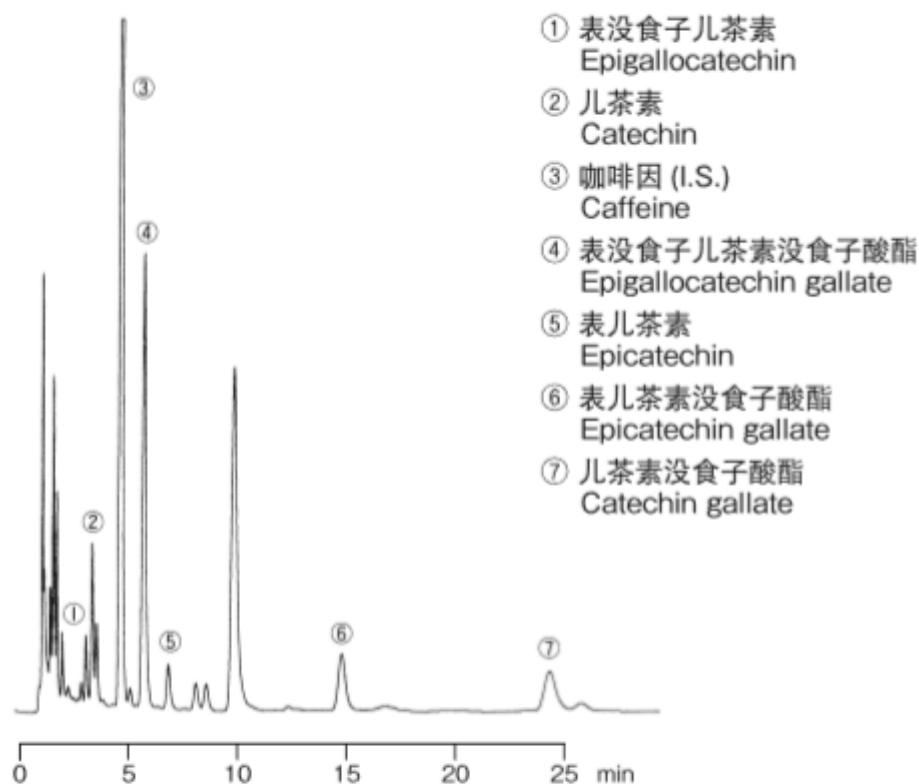

HPLC Conditions

Column : CAPCELL PAK C₁₈ UG120 S3 ; 4.6 mm i.d. × 100 mm

Mobile phase : 0.5 vol% H₃PO₄, H₂O / CH₃OH = 82 / 18

Flow rate : 0.8 mL/min


Temperature : 40 °C

Detection : UV 280 nm

Inj. vol. : 8 µL

儿茶素类（罐装乌龙茶饮料：S 公司）

罐装乌龙茶饮料的分析

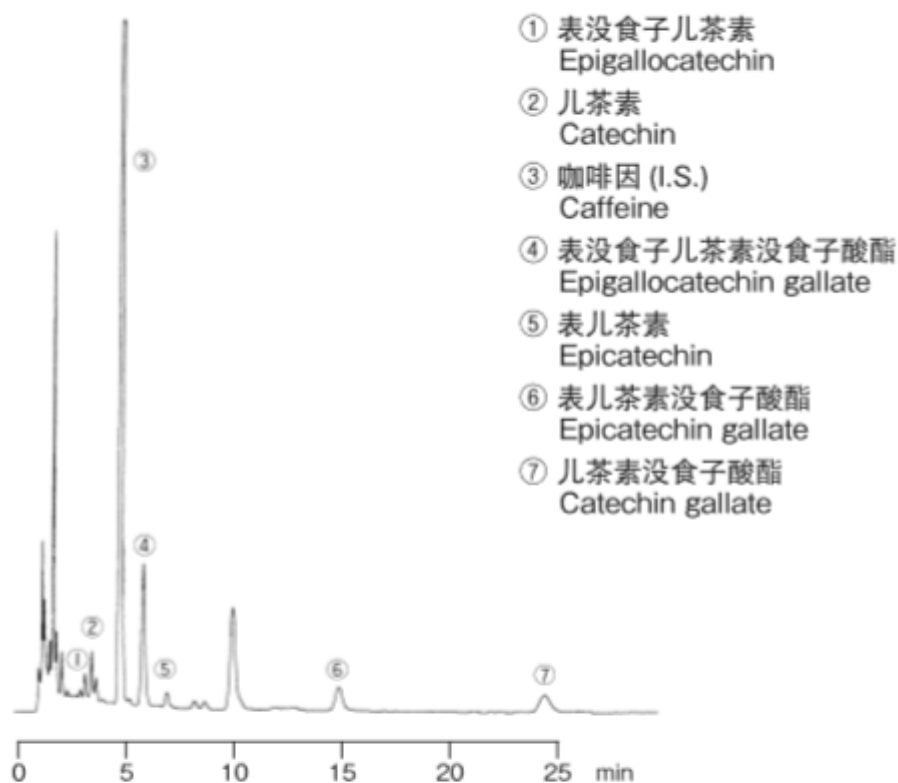

HPLC Conditions

Column : CAPCELL PAK C₁₈ UG120 S3 ; 4.6 mm i.d. × 100 mm
Mobile phase : 0.5 vol% H₃PO₄, H₂O / CH₃OH = 82 / 18
Flow rate : 0.8 mL/min
Temperature : 40 °C
Detection : UV 280 nm
Inj. vol. : 8 µL